

## 干式超导磁体系统

干式超导磁体系统包括干式变温超导磁体系统和干式室温孔超导磁体系统两种，具有用途广泛、功能扩展性强、操作简单、维护方便和运行成本低等特点。

### 1. 干式变温超导磁体系统

干式变温超导磁体系统(注册商标: CryoM®)仅使用一个 4K 脉管制冷机或 GM 制冷机冷却超导磁体和变温插件，具有操作简单、运行成本低和功能扩展性强等特点，是科研用户理想的低温强磁场实验平台。

标准 CryoM 集成 9T 螺旋管超导磁体，内径是 50mm，静态氦气环境，变温范围：1.5K-300K，标配四象限双极性超导电源、四通道高精度控温仪、八通道温度指示器、冷头悬浮减震和自恒压循环气路，标准电学测试样品杆集成多针真空贯穿、16pin puck 样品托、低温双绞测试线和低磁阻校准型温度计(校准范围：1K-325K)。可选配 12T/14T/16T 螺旋管超导磁体、带光学窗的分离线圈对超导磁体、矢量超导磁体和高均匀磁体等。



基于 GM 制冷机的干式变温超导磁体系统



基于脉管机的干式变温超导磁体系统



### 典型技术参数

冷头类型	GM 制冷机或阀体分离脉制冷机	磁场强度	±9T (螺旋管)
样品管内径	50mm	典型励磁时间	≤20 分钟
初始降温时间	≤12 小时(阀体分离脉管机) ≤16 小时(GM 制冷机)	变温范围	1.5K-300K
温度稳定性	±10mK(1.5K-20K), ±15mK(20K-300K)	样品环境	静态氦气

### 选 配

12T/14T/16T 螺旋管超导磁体/带水平光学窗的分离线圈对超导磁体/三轴矢量磁体/高均匀磁体  
单轴/双轴样品杆/光学样品杆/He-3 插件/稀释制冷机插件/AC 磁化率插件/热学测试插件  
超低震动组件/多针/SMA/BNC/光纤等真空贯穿/双绞/柔性同轴/半钢缆/三同轴/光纤

CryoM 提供多种选件, 如单轴/双轴样品杆、光学样品杆、He-3 插件/稀释制冷机插件、AC 磁化率插件/热学测试插件、超低震动组件(如冷头悬浮减震、减震沙箱等)和接线盒等。基于阀体分离脉管机和冷头悬浮减震设计的超低震动干式变温超导磁体的震动水平<100nm, 特别适合低温强磁场光学实验。



基于阀体分离脉管机、冷头悬浮设计并集成 He-3 插件的低震动干式变温超导磁体系统

此外，我们提供基于干式变温超导磁体系统的低温强磁场物性测试系统(TKMS)，集成低温强磁场下的电磁输运、Hall 测试、AC 磁化率测试和热输运测试等功能，并提供多路样品测试模块，允许同时对多个样品进行测试。




典型低温强磁场物性测试系统(TKMS)

He-3 插件匹配顶部装卸型 1.5K 制冷机(Acryo-1.5K)和干式变温超导磁体(CryoM)，内置低温吸附泵和密封 He-3 气路，单发工作模式，空载最低温度 $\leq 270\text{mK}$ ，在空载情况下最低温度保持时间 $\geq 60$  小时，在 350mK 时制冷量 $\geq 100\text{uW}$ 。标准 He-3 插件样品环境是真空，可选配交换 He-3 气体型和更长保持时间。典型应用包括电磁输运测试、量子霍尔效应、超导器件测试、Squid 测试、高压(DAC)、热输运测试等。

He-3 插件典型技术参数			
冷源	Acryo-1.5K 或 CryoM 低温系统	运行方式	单发
最低温度	$\leq 270\text{mK}$ (备注: 空载无外加热负载)	样品环境	真空 (选配交换气体)
最低温度下保持时间	$\geq 60$ 小时(备注: 使用 2.5L NTP He-3)		



典型 He-3 插件

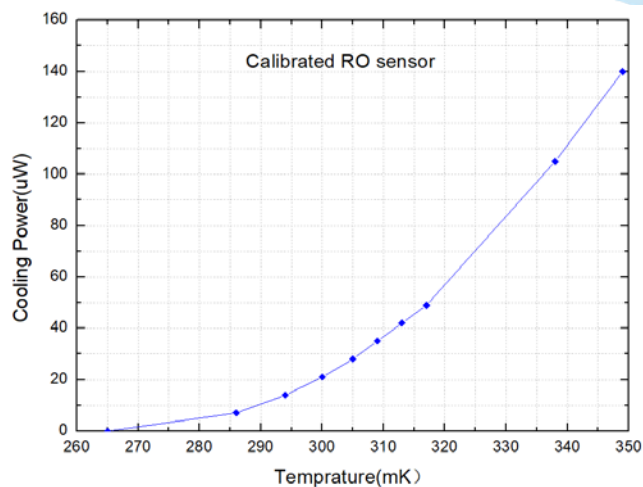


典型 He-3 插件制冷量与温度关系




AC 磁化率样品杆

AC 磁化率模块典型技术参数

AC 磁化率 $[\chi]$	灵敏度	$< 1 \times 10^{-8} \text{ emu}@10 \text{ kHz}$
	相位精度	$\pm 0.5^\circ$
驱动参数	幅度	0.01 to 16 Oe (峰值)
	频率范围	10 Hz to 10 kHz
线圈组尺寸	内径	8 mm
工作范围	温度: 1.5K to 325 K; 磁场: 0 to 16T (灵敏度条件@ AC 激励 10 mOe @10 kHz)	
备注	对应零场下的测试参数	

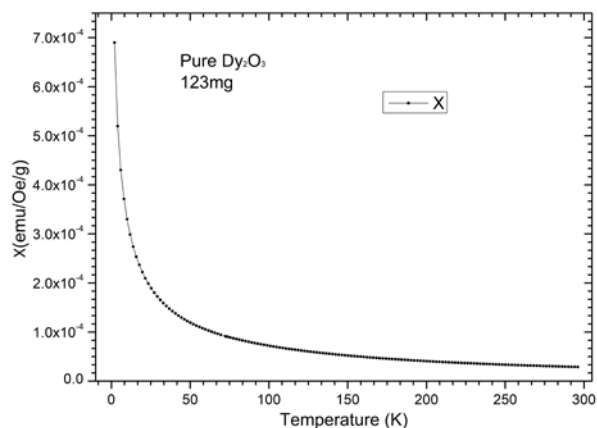

Dy<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉末烧结块体 AC 磁化率随温度变化曲线

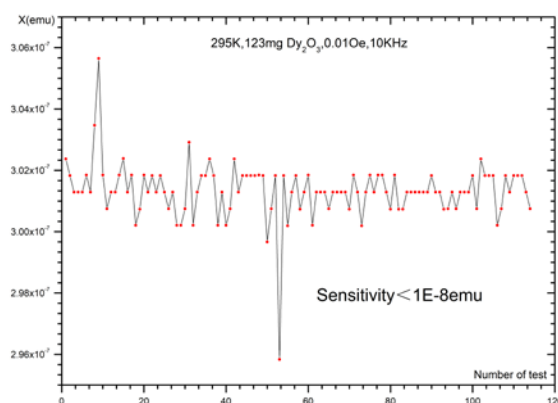

在 10kHz 时 AC 磁化率灵敏度测试



### 插件示例



电控马达单轴旋转杆



双轴旋转样品杆




光学样品杆



真空型样品杆


### 示例

1、采用 GM 制冷机作为冷源，冷头悬浮减震设计，静态交换氦气环境，样品管内径 50mm，最低温度 $<1.35\text{K}$ ，最高磁体强度为 9T，提供兼容金刚石对顶压机的高压样品杆。该测试系统提供低温强磁场高压电磁输运、Hall 测试等测试模块，并提供多路测试开关，允许同时测试多个常压样品。此外，该系统还提供马达驱动的高压旋转样品杆。

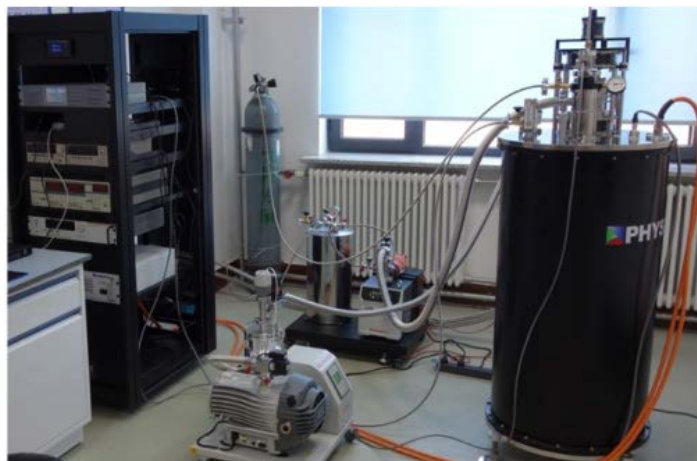



2、采用阀体分离低振动脉管制冷机作为冷源，并采用冷头悬浮减震专利技术，标称振动水平小于 100nm，该系统采用顶部装卸型设计，提供静态交换氦气环境，样品管内径 50mm，最低温度:<1.35K，最高磁体强度为 9T，真空型样品杆用于热学实验。

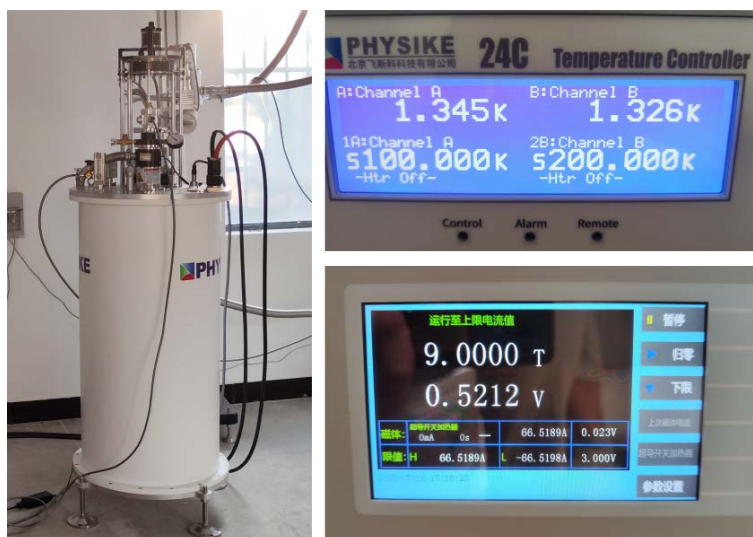

3、采用阀体分离脉管制冷机作为冷源，并采用冷头悬浮减震专利技术，采用顶部装卸型设计，振动水平:100nm，提供静态交换氦气环境，样品管内径 50mm，最低温度:<1.5K，最高磁体强度为 12T。



## 2. 干式室温孔超导磁体

室温孔超导磁体可集成低温装置、光谱仪、真空腔高温炉、反应装置、晶体生长设备和微波设备等, 用于强场下薄膜生长、电磁输运测试、回旋管、红外 THz、显微磁光、STM、AFM、ESR/EPR、NMR、中子散射、X-ray 等。



紧凑型螺旋管  
室温孔 5T/7T 超导磁体




紧凑型螺旋管  
室温孔 9T 超导磁体



紧凑型分立线圈对  
室温孔 5T 超导磁体



室温孔径 76mm 的 12T 超导磁体

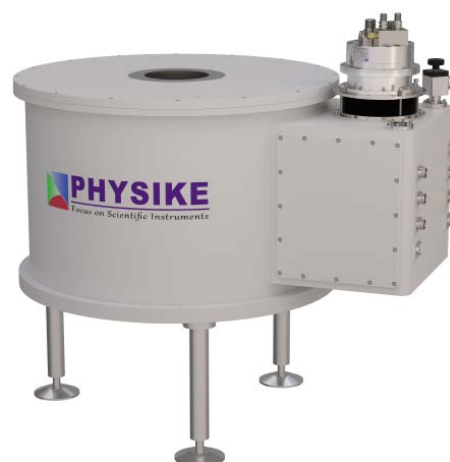


室温孔径 160mm 的三轴超导磁体

### 示 例

1、紧凑型 9T 室温孔超导磁体，匹配 Qcryo-S-500 无液氮低温恒温器，集成气膜调压金刚石对顶压机，实现低温 9T 强磁场高压显微 Raman 测试系统，并集成高压下电输运、Hall 和磁化率测试功能。



2. 两组室温孔超导磁体匹配 Qcryo-S-100 低温恒温器，提供具有 5 个自由度的样品托，用于红外 THz 实验。

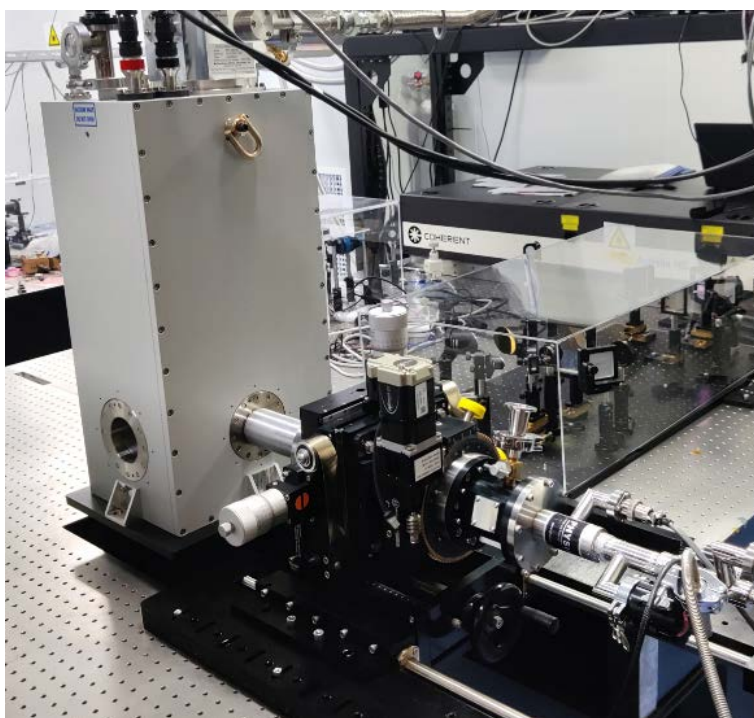



3. 14T 室温孔超导磁体，匹配 1.5K 顶部装卸型制冷机，样品管内径 65mm，VTI 最低温度小于 1.45K，提供 He-3 插件，最低温度 < 270mK。



4. 紧凑型 9T 室温孔超导磁体，匹配 4K 顶部装卸型制冷机，4K 顶部装卸型制冷机采用阀体分离脉管机加冷头悬浮减震，振动水平小于 100nm，样品管顶部集成三维线性平移台，底部带光学窗，提供集成金刚石对顶砧压机的高压旋转杆。

